

長作動距離三眼ズーム実体顕微鏡


ズーム比9倍なのに110mmの長作動距離
微動ハンドルによりピント調節もらくらく



- 9倍の非常に高いズーム比
- 110mmのワーキングディスタンス
- 微動ハンドル搭載
- 落射・透過の2種類の照明（同時照射可能）
- カメラを接続できる三眼鏡筒

■ 最新レンズ設計で9倍の非常に高いズーム比

総合倍率が7～63倍という広いズーム範囲はより広範囲な観察が可能です。
最新のレンズ設計のため倍率を変えてもほぼピントがずれません。

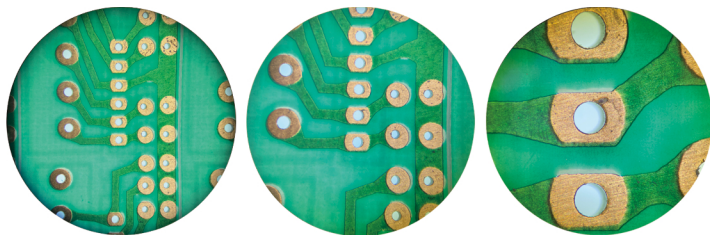

■ 微動ハンドルを搭載

実体顕微鏡でありながら粗動ハンドルのみならず微動ハンドルが搭載されており、
繊細な観察に大変便利です。
微動ハンドルには目盛り付き（一目盛り 0.004mm / 4μ）



■ 110mmのワーキングディスタンス

63倍までの高倍率に関わらず、110mmの長い作動距離を実現。



■ 落射照明と透過照明を基本搭載

照明は上からの照明（落射照明）と下からの照明（透過照明）の二つ照明を基本搭載・
同時使用可能。ランプ交換不要の高輝度白色LEDを採用。




■ 仕様

型番	YSZ
総合倍率	7倍～63倍
接眼レンズ	広視野レンズ Wide field 10×(視野数 22mm) 2個
対物レンズ	0.7倍～6.3倍（ズーム比9倍）
焦点調節	同軸粗微動ハンドル（微動目盛り 1Division=4μm）
作動距離	110mm
鏡筒	三眼鏡筒(Trinocular) 斜面(inclination) 45°
眼幅調整距離	53～75mm
視度調整範囲	±5
光源	落射照明：白色LED 3W 12V、輝度・角度調整可能 透過照明：白色LED 5W 12V、輝度調整可能 電源：AC 100V～240 50/60Hz
本体サイズ	W280×D335×H462.5mm / 約6kg
付属品	ダストカバー、Cマウントカメラアダプター1×
価格	260,000円（税抜き）
JAN	4562357222581


■ オプション

YAO-50S	0.5倍補助レンズ	35,000円（税抜き）	4562357222642
YAO-52S	2倍補助レンズ	37,000円（税抜き）	4562357222659
YAE-13S	実体目盛り入り接眼レンズWF10×（φ22）	17,000円（税抜き）	4562357222635
YAK-05N	CCD カメラアダプター 0.5×	38,000円（税抜き）	4562357221492

Front

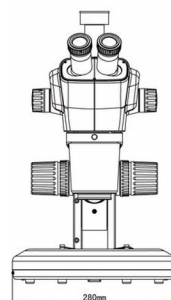

Side

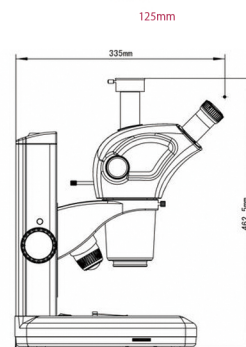

八洲光学工業株式会社
YASHIMA OPTICAL CO., LTD.

〒351-0113 埼玉県和光市中央1-7-14 根本ビル2階
TEL 048-424-8818 / FAX 048-424-8966
MAIL yashima@microscope.co.jp / URL http://www.microscope.co.jp

販売代理店