


対物レンズ変換リング (日本製 材質：真鍮)

YAR-1：対物レンズ変換リング Nikon→OLYMPUS
 YAR-2：対物レンズ変換リング OLYMPUS→Nikon
 YAR-3：対物レンズ変換リング OLYMPUS→ミットヨ
 YAR-4：対物レンズ変換リング Nikon→ミットヨ
 ¥4,500 (税抜)

顕微鏡のメーカーとは異なるメーカーの対物レンズを取付けるために、対物レンズの規格を変換するリングです。

これを使えば、顕微鏡本体と異なる規格の無限補正対物レンズを、取付けることができるようになるため、高価な対物レンズを新たに購入する必要がありません。

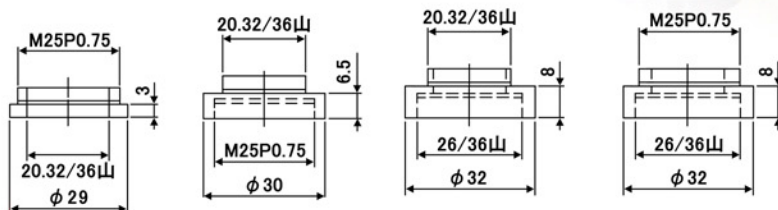


YAR-1	Nikon規格 (M25 P0.75) からOLYMPUS規格 (20.32/36mm) に変換。 標準的なNikonの顕微鏡にOLYMPUSの無限補正対物レンズを取付けるときに使用します。
YAR-2	OLYMPUS規格 (20.32/36mm) からNikon規格 (M25 P0.75) に変換 標準的なOLYMPUSの顕微鏡にNikonの無限補正対物レンズを取付けるときに使用します。
YAR-3	OLYMPUS規格 (20.32/36mm) からミットヨ規格 (26/36mm) に変換 標準的なOLYMPUSの顕微鏡にミットヨの無限補正対物レンズを取付けるときに使用します。
YAR-4	Nikon規格 (M25 P0.75) からミットヨ規格 (26/36mm) に変換 標準的なNikonの顕微鏡にミットヨの無限補正対物レンズを取付けるときに使用します。

※各メーカーの標準規格であり、全ての製品に当てはまるものでは御座いません。規格をお確かめの上ご購入下さい。

対物レンズ延長リング (日本製 材質：真鍮)

YAK-13：対物レンズ延長リング6mm
 YAK-14：対物レンズ延長リング5mm
 ¥2,400 (税抜)

RMSマウント (φ20.32 P0.706) に対応した延長リングです。片方はRMSネジ凸リング、反対側はRMSネジ凹リングとなっており、有限補正対物レンズの鏡筒長を伸ばすことができます。鏡筒長の異なる対物レンズを使用する場合、一般的な顕微鏡、実験用・オリジナルシステムなどにお勧めです。

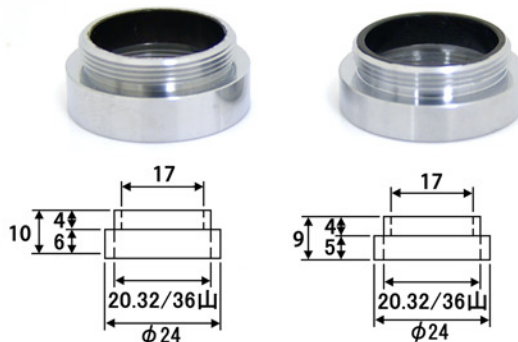

八洲光学工業株式会社 YASHIMA OPTICAL CO., LTD.

〒166-0012 東京都杉並区和田1-1-12 八洲ビル5階

TEL 03-5340-0391 / FAX 03-5340-0485 / MAIL yashima@microscope.co.jp / URL <http://www.microscope.co.jp>